

Das Thermo Scientific-Lieferprogramm

Seit 2023 bietet die Klaus Ziemer GmbH auch das gesamte Thermo Scientific-Lieferprogramm an. Im Folgenden stellen wir Ihnen einige der im Bereich der Chromatographie besonders interessanten Produkte vor. Gerne beraten wir Sie hierzu näher. Sollten Sie andere Produkte aus dem Thermo Scientific-Sortiment benötigen, erstellen wir Ihnen natürlich auch hierzu gerne ein Angebot!



thermo
scientific

Gaschromatographie (GC)

TraceGOLD GC-Säulen sind eine umfangreiche Reihe hochwertiger GC-Säulen aus dem Thermo Scientific-Lieferprogramm.

Flüssigchromatographie (HPLC)

Accucore ist die Reihe der Core-Shell- (Solid Core-) Trennmaterialien von Thermo Scientific. Durch verkürzte Diffusionswege innerhalb der Partikel wird der Massentransfer beschleunigt und die Peakbreite reduziert. Optimierte Packverfahren sorgen zudem für möglichst geringe Eddy-Diffusion und somit einer weiteren Verbesserung der Trennleistung bei niedrigem Gegendruck.




Hypersil Gold HPLC-Säulen liefern hochgradig symmetrische Peaks und verbessern dadurch die Empfindlichkeit Ihrer Analytik.

EASY-Spray HPLC-Säulen ergeben extrem scharfe Peaks, haben ausgezeichnete Trennleistung und Peakkapazität und einen integrierten Quarzglas-Emitter, der totvolumenfreien Anschluss an Ihr MS und ein sehr stabiles Spray ermöglicht. Verschiedene Packungsmaterialien sind erhältlich, um maximale Flexibilität im Bereich der Peptidtrennungen zu ermöglichen.



Viper und nanoViper Fingertight Fittings ermöglichen nahezu totvolumenfreie Verbindungen bis 1500 bar und sind sehr einfach von Hand und ohne Werkzeug zu installieren.

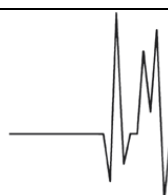

ZIEMER Chromatographie

Am Parir 27 · 52379 Langerwehe
Telefon 024 23 / 40493-5 · Fax 024 23 / 40493-88
E-Mail: info@ziemer-chromatographie.de

Besuchen Sie unseren **Online-Shop** unter: www.ziemer-chromatographie.de